



Nima Kub Visco Adjuster

Dyna för brukare som använder rullstol dagligen, som har svårt att variera sin sittställning, har risk att utveckla sår och/eller har behov av viss positionering och avlastning. Passar också väl för värmekänsliga brukare med stora problem med fukt i sittytan.

Distanser mellan kuber och 3D mesh överdrag

Tillbehörsförteckning

Överdrag standard 3d mesh ej ink skyddat.

Inkontinensskyddat överdrag. Hygienhätta

Dynans höjd är ca 8,5 cm under låret i obelastat läge.

Dynan är identisk med Nima Kub Visco men har kardborre på undersidan av överdraget för att kunna fästa justeringskilar

Höga men mjuka kanter ger positionering men möjliggör ändå förflyttning.

Mjukt skum mellan bak och lår ger lateral tryckavlastning om brukaren skjuvar framåt
Extra mjukt skum på toppen ger en behaglig sits

Viscoelastiskt skum (memoryfoam) under sittbensknölna för extra tryckavlastning

Stabilt men tryckfördelande skum i dynans framkant, sidor samt under det viskoelastiska skummet i sittdelen

Hårdare skum i botten för stabilitet, detta är fasat i sidorna för att dynan skall passa i hängmatte och plan sits

Helt öppet mellan kuberna för att öka luftcirkulation och ge bra mikroklimat

Tillbehörsförteckning:

Luftigt standardöverdrag

Ink skyddat överdrag

Hygienhätta

Nima Kub Visco Adjuster är en luftig och mjuk dyna med bendelare, positioneringsstöd och extra tryckavlastning i sittgropen. Den erbjuder viss möjlighet till justering

Fakta / Teknisk dokumentation/varudeklaration Material
Dyna: Toppskikt av mjukt polyeter, under detta ett lager viscoskum för avlastning och sedan ytterligare ett ett lager hårdare polyeterskum. Botten av cellpolyeten för styvhet. Formad i kuber under sittytan för ytterligare luftpassage.

Överdrag: Polyester tyg i 3d Mesh

Brandnorm: Uppfyller ISO 7176-16



Garanti: 2 år

CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745

Kategori 04 33 03, ISO-kod: 04 33 03 Tryckavlastande dyna.

Produkten är märkt med UDI-DI enligt MDR (EU) 2017/745,

baserat på GS1-systemet (GTIN). Varje storlek har ett unikt

UDI-DI kopplat till respektive artikelnummer. (t.ex. artikel

KUBVISCOAD = GS1-kod 7333376006028 Märkt med EAN-13

streckkod Vikt:1-2,5 kg beroende på storlek

Förväntad livslängd 5 år

Dynan kan användas i andra sittmöbler men inte beskäras


med bibehållen CE

Brukarvikt: Max 150 kg upp till och inklusive storlek 45x45 cm

Max 200 kg i storlek över 45x45 cm

Fasad i underkant för att passa väl i plan såväl som

hängmattesits samt rundad i bakkant för rullstolens rör.

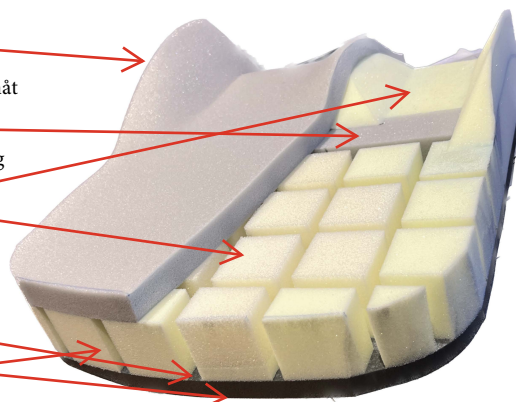

Tvättråd dyna
Tvättråd överdrag



Bruksanvisning / Instruktioner för handhavande / Skötselinstruktioner/Monteringsanvisning

1. Tag ur dynan ur påsen. Dynan ligger i sitt överdrag och överdraget är märkt med etiketter som visar hur dynan skall placeras på stolen. Dynan kommer färdig ur förpackning och behöver inte ställas in.
2. Kontrollera storlek och etikettering på dynan och placera enligt etikettering. Felaktig storlek, placering eller modifiering kan öka risken för trycksador.
3. Överdraget är som standard EJ inkontinensskyddat.
4. Rengöring och skötsel. Vid behov eller mellan två brukare: Dynbasen torkas av med desinfektion alternativt med vatten och tvålösning 40°C som förbehandlats med bakteriehämmande medel. Plantorka dynbasen i torkskåp eller genom att låta den stå fritt. Överdraget kan tvättas i maskin i 60 grader och tål torktumling och torkskåp.
5. Skrotningsanvisning. Uttjänt dyna sorteras under brännbart
6. För fullständiga varningar och begränsningar, se utökad bruksanvisning

Tillverkare: NimaCare AB. SRN: SE-MF-000050989

Sigurdvägen 4, 18254 Djursholm, Sverige

Mail:info@nimacare.se Tel 0706355070 Web: www.nimacare.se



Produktnamn	Art nr	Produktnamn	Storlek	Beskrivning
Abduktionskil	ABDK1	Nima Abduktionskil	2-0 cm	Bendelarförhöjning, placeras på bendelaren med kardborre för att ytterligare höja denna
Främre kil	Fkil	Nima Främre Kil	25 cm djup 2.5-0,5 cm	Lutar dynan bakåt för att motverka famåtglidning/skjuvning, Denna kan beskåras för att passa dyna samt delas på halva dynansyta för att uppnå förhöjning under endast ett ben. Placeras under dynan med kardborre
Oval främre kil	OFKit	Nima Oval främre Kil	25 cm djup 3,5-2.5-0,5 cm	Lutar dynan bakåt för att motverka famåtglidning/skjuvning, Denna kan beskåras för att passa dyna samt delas på halva dynansyta för att uppnå förhöjning under endast ett ben. Placeras under dynan med kardborre. Samma funktion som ovan men oval undersida för att passa hängmattesits
Lateral kil	LKIL	Nima Lateral Kil	2-0,5 cm djup 12 cm	Placeras under dynans sidor för att luta dynan sidledes och ge lateralt stöd
Gradviskil	Gkil	Nima Gradvis Kil	Rektangulär, 2 cm höga sidan, 0-5 låga sidorna	Sluttande kil som kan placeras i främre eller bakre hörnen på dynan för att ge extra stöd och justering
Standardöverdrag	Övxxxx	Nima Överdrag	xxx	Standardöverdrag till befintlig dyna
Ink Skyddat överdrag	ÖVINKxxx	Nima Överdrag INK	xxx	Ink överdrag till befintlig dyna
Hygienhätta	NHxxxx	Nima Hygienhätta	xxx	Hygienhätta, generell hätta som passar olika produkter